

警察や医学研究機関の DNAサンプル保存用に設計

サビレックス *SAVILLEX PFA Forensic Vials*

PFA法医学バイアル

DNA保存・運搬用



0.2ml

0.5ml

アメリカの某国立研究所からの依頼でDNAの保管および運搬用としてサビレックス社が特別に設計・製造した特殊バイアルです。

実物大



0.2ml

0.5ml

- 01 DNA保存用に特別製造された専用バイアル
- 02 不純物の溶出がない高純度PFA樹脂製
- 03 サンプルロスが極めて少ない非粘着性
- 04 液体窒素などの低温域での保管に適応
- 05 ほぼすべての薬品に対して不活性
- 06 2サイズの容量と3種類の蓋から選択可能
- 07 販売単位:1本～、容器と蓋の別購入も可能

サビレックス社輸入総代理店

INOX 東栄株式会社

【DNA保存・運搬用】
PFA法医学バイアル

液体窒素やフリーザーでの多量保管に対応
DNAサンプル保存用に特化したPFAバイアル

- 警察や研究機関での極少量のDNAサンプル保存専用バイアル
- アメリカの某国立研究所の依頼により製造された特注バイアルを一般販売化した製品。
- 液体窒素の液相(-196℃)・気相(-150℃)、超低温フリーザー(-80℃)、標準的なフリーザー(4℃)等での多量集中保存に適応。
- PFAのため液離れに優れており、ポリプロピレン製バイアルと比較してサンプル回収に優れています。
- 使用温度範囲:-200℃~+260℃、オートクレーブ可能。
- 容量0.2mlと0.5mlの2サイズ、それぞれ3種類の蓋を選択可能。




- 通常密閉用の標準蓋、注射針が貫通する針貫通蓋、上面に孔があるセプタム蓋から選択可能。(全て捻子式)

					注射針を差すことが可能、針を抜いた跡はシリコンの収縮により塞がります。
標準蓋	針貫通蓋	セプタム蓋	シリコン面	PTFE面	
標準的な密閉用捻子蓋	蓋上面が薄肉で注射針が貫通する捻子蓋	蓋上面の中央に穴がある捻子蓋	セプタム蓋用ラミネート		
			セプタム蓋の内側にはめて孔のシーリングに使用、シリコン面を上、PTFE面を下(サンプル側)にして使用		

法医学バイアル仕様 ※1

容量	蓋タイプ	内底	A 蓋外径	B 蓋含む高さ	C 容器内高さ	D 容器外径	E 容器内径
0.2ml	標準蓋	U	12.4mm	34.5mm	17.6mm	10.7mm	5.2mm
	針貫通蓋	U	12.4mm	34.5mm	17.6mm	10.7mm	5.2mm
	セプタム蓋	U	12.4mm	34.5mm	17.6mm	10.7mm	5.2mm
0.5ml	標準蓋	U	12.4mm	34.5mm	30.6mm	10.7mm	5.2mm
	針貫通蓋	U	12.4mm	34.5mm	30.6mm	10.7mm	5.2mm
	セプタム蓋	U	12.4mm	34.5mm	30.6mm	10.7mm	5.2mm

※1: 製品には個体差があり、同じ製品でも若干のサイズ誤差が発生いたします。

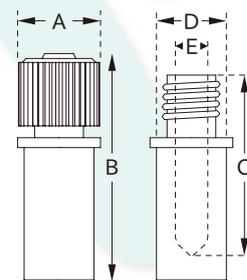

法医学バイアル品番・価格

容量	付属蓋タイプ(セット購入時)	容器・蓋セット		容器のみ		蓋のみ	
		品番	価格	品番	価格	品番	価格
0.2ml	標準蓋	201-702-42-008-01	4,000円	200-702-42	2,900円	600-008-01	1,100円
	針貫通蓋	201-702-42-008-80	5,500円	200-702-42	2,900円	600-008-80	2,600円
	セプタム蓋	201-702-42-008-72	6,500円	200-702-42	2,900円	600-008-72	3,600円
0.5ml	標準蓋	201-705-42-008-01	3,800円	200-705-42	2,700円	600-008-01	1,100円
	針貫通蓋	201-705-42-008-80	5,300円	200-705-42	2,700円	600-008-80	2,600円
	セプタム蓋	201-705-42-008-72	6,300円	200-705-42	2,700円	600-008-72	3,600円

法医学バイアル関連製品

品名	厚さ	直径	品番	価格
セプタム蓋用ラミネート	1.6mm(シリコン面:1.3mm、PTFE面:0.25mm)	9.4mm	730-9909	16,400円(10枚入)

仕様・デザイン・価格変更および生産中止など、予告なく実施される場合がございます。納品までに期間を要する場合もございます。掲載の数値などはメーカーによる基準値につき、ご使用条件により異なる場合がありますため、あくまでも選定の目安としてご覧ください。各種研究に応じて安全に関する知識および経験を有する指導者のもとでご使用ください。ご使用前には目視等で破損等の異常の有無を確認し、テスト・点検を行い、安全を確認した上でご使用ください。不良・破損などによって誘発される二次的損失については対応はいたしかねます。予めご理解のほどお願いします。製品には個体差があり同じ製品でも若干のサイズ誤差がございます。印刷物のため、実物と色が多少異なる場合がございます。価格はすべて税抜です。

お問い合わせは下記へ

サビレックス社 輸入 総代理店
INOX 東栄株式会社
www.labinox.co.jp